

日本品牌

**HORIBA**

的最佳機種

# 食品業

# 粉體粒徑測試

靜態雷射散射  
粒徑分析儀

測量範圍：**0.01 $\mu$ m ~ 5000 $\mu$ m**

## ■ LA-960

## ■ 搭配 乾式量測系統

應用領域

麵粉

玉米粉

豆瓣醬

米粉

穀粉

茶粉

豆粉

Lipid Powder

乳化香精

牛奶

巧克力

保健食品



- ±0.6% 超高準確度及±0.1% 優越重複性
- 分散媒定量自動注入、消泡、測量、儲存、列印、排料清洗自動化且1分鐘完成
- 多樣化附件，可進行乾式測量、微量樣品、黏性磁性樣品、溶劑樣品、噴霧樣品測量
- 樣品槽拆卸、清洗簡單方便無需任何工具



測量結果轉換成篩網模式：方便數據比對

## ■ 相關設備 SZ-100Z 奈米粒徑暨界面電位量測儀



## ■ 擴充附件



### 黏性樣品槽

適合黏度高的樣品、磁性材料、膏狀樣品



### 乾式系統

用於測量粉狀、乾式樣本





### 微量樣品槽

適合少量、珍貴樣品或有毒、腐蝕性樣品

## ■ 麵粉測試結果

乾式結果: 69 $\mu$ m

濕式結果: 68 $\mu$ m

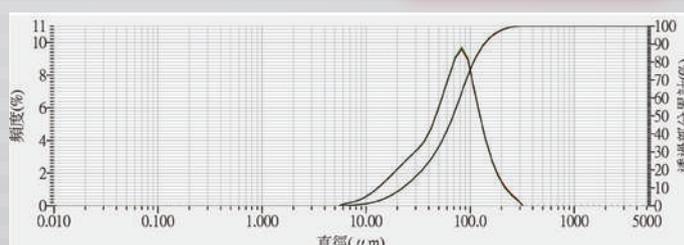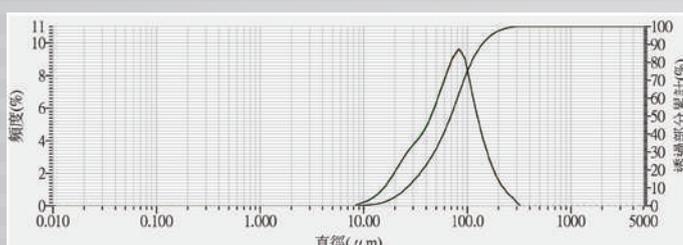

全拓科技有限公司  
TRENDTOP SCIENTIFIC CORP.  
新北市中和區中正路716號13樓之3

TEL : 02-8227-3526  
sales@trendtop.com.tw

另提供樣品收費代測  
歡迎洽詢·專人服務

